




NuEra Tight

TRAITEMENTS CORPORELS PERSONNALISÉS

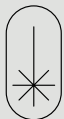

XDERMA
continuous SKINCARE

Exclusive Distributor LUMENIS

L'AVENIR DES
TRAITEMENTS DE LA
PEAU COMMENCE
MAINTENANT

BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE DE TRAITEMENTS CORPORELS PERSONNALISÉS

Aucun patient n'est identique à un autre

C'est pourquoi un plan de traitement unique n'est plus applicable.

Oubliez désormais toutes les limites

Le remodelage du corps prend un tout nouveau sens avec une solution révolutionnaire pour réduire la graisse, raffermir la peau, réduire la cellulite et les rides. Tout-en-un.

Découvrez un niveau de personnalisation inégalé

NuEra® Tight est optimisé par la technologie FocalRF™, qui utilise plusieurs fréquences RF pour régler la profondeur de pénétration de l'énergie, en tenant compte de plusieurs indications cliniques, états de la peau et zones corporelles, au cours de la même séance.

Pour un traitement aussi unique que vos patients



LE REMODELAGE DU CORPS PREND UN NOUVEAU SENS

La radiofréquence (RF) est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, car les patients souhaitent remodeler les zones problématiques confortablement et sans temps d'arrêt. NuEra Tight, doté de la technologie FocalRF, utilise 5 fréquences différentes pour régler la profondeur de pénétration de l'énergie en chauffant des couches spécifiques de la peau et des tissus pour réduire la graisse, resserrer la peau et réduire la cellulite et les rides.


Réduction de la graisse

Une expérience de remodelage corporel vraiment personnalisée commence avec la technologie FocalRF qui traite facilement et efficacement la graisse sous-cutanée sur n'importe quelle région du corps. Choisissez un traitement superficiel à 2MHz pour éliminer les cellules graisseuses tenaces ou sélectionnez 470kHz pour un chauffage plus profond.

Avant



Après

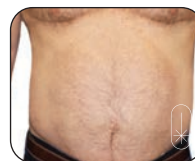

Avec l'aimable autorisation de Dr Jeffrey Caruth.

Resserrement de la peau

NuEra Tight élève et régule automatiquement la température des tissus cutanés au degré requis, stimulant ainsi le collagène et améliorant les signes de relâchement cutané et les rides. Qu'il s'agisse de grandes zones du corps ou de petites zones du visage, la technologie FocalRF cible la pénétration d'énergie dans la couche du derme, garantissant ainsi des traitements sûrs et efficaces.

Avant



Après



Avec l'aimable autorisation de Dr Luigi Rizzi.

Réduction de la cellulite

Grâce à la technologie FocalRF, NuEra Tight applique plusieurs fréquences, deux modes de traitement et un massage mécanique efficace pour la manipulation du tissu conjonctif, afin de remodeler la cellulite et d'améliorer l'apparence des bosses et des capitons.

Avant



Après



Avec l'aimable autorisation de Dr Clark Schierle, Ph.D., FACS


Réduction des rides

Grâce à des fréquences élevées et à un contrôle précis de la température, NuEra Tight est capable de stimuler l'activité des fibroblastes et d'améliorer le flux sanguin, créant ainsi un effet lissant immédiat qui continuera à s'améliorer à mesure que le mécanisme de guérison du corps génère une nouvelle production de collagène.

Avant



Après

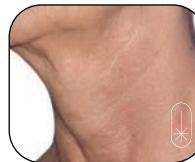


Avec l'aimable autorisation de Dr Gerhard Sattler.

PROFONDEUR DE TRAITEMENT CONTRÔLÉE PAR LA TECHNOLOGIE FOCALRF

Découvrez un nouveau niveau de contrôle avec la technologie FocalRF

Utilisez plusieurs fréquences RF pour régler la profondeur de pénétration de l'énergie en tenant compte des différentes indications, des variations d'épaisseur des tissus entre les zones du corps et les patients.

Choisissez votre fréquence

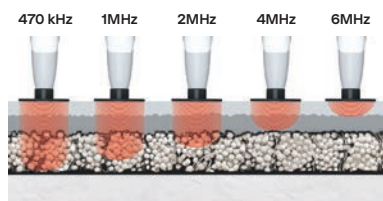

Contrôlez la Profondeur

Pour traiter différentes affections cutanées

Contrôlez les Résultats

Pour un meilleur contrôle des objectifs cliniques

Contrôlez la Sécurité

Pour cibler la profondeur optimale des tissus



DES OUTILS AVANCÉS POUR LE PATIENT ESTHÉTIQUE D'AUJOURD'HUI

Lumenis a développé NuEra Tight avec des fonctionnalités de pointe dans un dispositif facile à utiliser avec une interface utilisateur graphique intuitive. La sélection des paramètres de traitement appropriés se fait d'une simple pression.

NuLogic

Protocole Avancé Pour Les Utilisateurs Experts

—> Protocole de traitement unique

Plusieurs protocoles de traitement pour différentes indications et couches de la peau appliqués automatiquement en une seule session de traitement.

—> Un nouveau niveau de personnalisation

Définissez des valeurs multiples pour la fréquence, la température, le temps et la taille des électrodes.

NuAPIC

Contrôle Automatique et Personnalisé De La Température

Assurez une température thérapeutique tout au long de la procédure. Adaptez la puissance en fonction des caractéristiques uniques du patient.

Reconnaissance Automatique Des Accessoires

Électrodes multi-taille

Huit électrodes CCET (Coated Capacitive Energy Transfer) pour s'adapter parfaitement à chaque patient, de la tête aux pieds, pour un meilleur confort et une distribution uniforme de l'énergie.

Pièces à main

Trois pièces à main ergonomiques et légères: Corps, Visage et Bipolaire.



AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES AVEC NUERA TIGHT


La demande est claire. Les patients veulent des traitements rapides et confortables et des résultats durables qui paraissent naturels. Avec NuEra Tight, vous pouvez répondre à cette demande tout en dépassant les attentes. Qu'il s'agisse d'une solution autonome pour la réduction de la graisse, le resserrement de la peau, la réduction de la cellulite et des rides ou d'une combinaison avec d'autres modalités, NuEra Tight contribue à créer des bénéfices pour votre cabinet. Mieux encore, NuEra Tight ne nécessite aucun consommable coûteux, de sorte que rien ne vous empêche d'atteindre votre retour sur investissement.



Témoignages De Nos Clients

«Les traitements par radiofréquence font partie des thérapies esthétiques les plus demandées aujourd'hui. NuEra Tight avec la technologie ForcalRF est hautement personnalisable grâce à un large choix de fréquences et de pièces à main qui permettent des traitements rapides, confortables et non invasifs. Mes patients obtiennent ainsi l'amélioration de leur apparence tout en garantissant la sécurité et l'efficacité grâce à la fonction de contrôle de la température NuAPIC. Cet appareil est indolore mais efficace pour le remodelage du corps, ce qui change la donne pour mes patients.»

Dr Macrene Alexiades-Armenakas, Ph.D., FAAD, Dermatologue clinique, Chirurgien laser et Chercheur en dermatologie, New York.

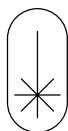

DÉCOUVRONS ENSEMBLE
COMMENT CHANGER
LA VIE DE VOS PATIENTS.

Nous contacter

Ilona Messchendorp
04 89 39 83 41
imesschendorp@xderma-skin.com



Spécifications

Fréquence D'émission Focalrf ($\pm 1\%$)	470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz
Énergie De Sortie ($\pm 10\%$)	250 W
Affichage Lcd Écran Tactile	15"
Système De Couplage	Capacitif
Mode Opérateur	Préréglages de traitement automatique, NuLogic et manuel
Contrôle De Température	NuAPIC
Plage De Température	De 35°C à 45°C $\pm 1^\circ\text{C}$
Minuterie	Jusqu'à 90 min
Alimentation	100-240 Vac; 50/60 Hz; 350 W
Dimensions	127x55x60 cm (HxWxD)
Poids	Poids 40 Kg
Classe de sécurité	Classe I - type BF
Pièces À Main	Visage, Corps, Bipolaire
Électrodes De Retour	Embout Jetable
Électrodes Enrobées Capacitives	$\varnothing 20$ mm, $\varnothing 30$ mm, $\varnothing 40$ mm, $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 70$ mm, $\varnothing 80$ mm, $\varnothing 100$ mm, $\varnothing 40$ mm avec massage

NuEra Tight 1CH est destiné au :

- Traitement de la dermopanniculite oedémateuse-fibreuse-scléreuse
- Traitement de l'atrophie et de l'élastose cutanée
- Traitement de la microcirculation et de l'insuffisance veineuse
- Traitement de l'hyperplasie et de l'hypertrophie des adipocytes

Mises en garde et risques: NuEra Tight ne convient pas aux personnes enceintes, souffrant d'une infection ou d'une maladie, ou sensibles à la chaleur. Il faut éviter son application sur les coupures, les plaies, les piercings et les tatouages ainsi que sur les zones traitées avec des produits de comblement injectables et toxines un mois avant le traitement. Les patients ayant un implant métallique ou un dispositif implanté (par exemple un pacemaker) doivent d'abord consulter un médecin qualifié. Si cela est jugé approprié, l'embout jetable doit être placé loin de l'implant. N'utilisez pas d'anesthésiques locaux, oraux ou systémiques avant ou pendant le traitement car les patients doivent avoir un retour régulier pour assurer leur confort continu. Il faut isoler les patients des objets métalliques, en particulier ceux qui sont en contact direct (par exemple le lit). Une consultation complète du praticien est toujours conseillée ; pour connaître l'intégralité des contre-indications et des risques, veuillez consulter le manuel d'utilisation de NuEra Tight.