



SPLENDOR X
BY LUMENIS

SPENDOR X, L'ÉPILATION LASER RÉINVENTÉE

La puissance de deux longueurs d'onde.
La précision d'un traitement sur mesure.



UNE TECHNOLOGIE UNIQUE. DES RÉSULTATS SANS COMPROMIS.

Splendor X est la seule plateforme laser associant simultanément les longueurs d'onde Alexandrite 755 nm et Nd:YAG 1064 nm grâce à la technologie exclusive BLEND X™.

Cette innovation permet d'adapter précisément chaque traitement au phototype, à la couleur et à l'épaisseur du poil pour offrir une expérience personnalisée et des résultats durables.

POURQUOI SPLENDOR X ?

- Une efficacité remarquable sur tous les phototypes
- Une couverture de traitement optimisée
- Un confort patient renforcé
- Une rentabilité élevée pour le cabinet



L'INDICATION LA PLUS DEMANDÉE EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE

L'épilation laser reste l'un des actes les plus recherchés par les patients. Avec Splendor X, vous disposez d'une plateforme capable de répondre à cette demande avec rapidité, efficacité et sécurité.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ



Des séances plus rapides

Les grands spots carrés permettent de couvrir davantage de surface à chaque impulsion.



Plus de patients par jour

Des protocoles optimisés et une vitesse de traitement élevée.



Un retour sur investissement accéléré
Des traitements fortement demandés tout au long de l'année.



BLEND X™, LA PUISSANCE DE DEUX LASERS EN UN


La véritable révolution Splendor X réside dans sa capacité à combiner les avantages de l'Alexandrite et du Nd:YAG au sein d'une même impulsion.

UNE PERSONNALISATION INÉDITE

Chaque patient est unique

Chaque traitement peut être ajusté selon :

- le phototype,
- la couleur du poil,
- son épaisseur,
- la zone traitée.

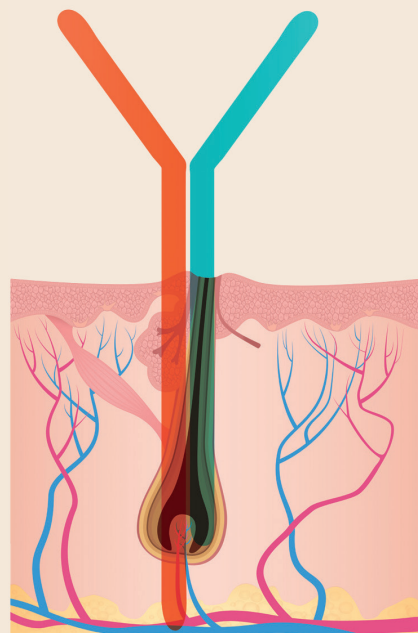

UNE PLATEFORME, DES POSSIBILITÉS MULTIPLES

Cette flexibilité permet de traiter efficacement aussi bien les peaux claires que les phototypes foncés.




LE CONFORT AU CŒUR DU TRAITEMENT

Une expérience patient réussie favorise l'observance du protocole et la fidélisation.

Splendor X intègre plusieurs innovations destinées à améliorer le confort :

- 1 Évacuateur de fumée intégré
- 2 Pièce à main ergonomique conçue pour optimiser le confort du praticien et du patient (grâce notamment au connecteur sphérique qui facilite les mouvements de la pièce à main)
- 3 Des embouts interchangeables (carrés et ronds) faciles à remplacer, adaptés à toutes les tailles de spot, y compris les plus grandes du marché
- 4 Double système de refroidissement Cryo-Touch™ et Cryo-Air™ intégré

= Un environnement de traitement plus agréable et plus sûr.

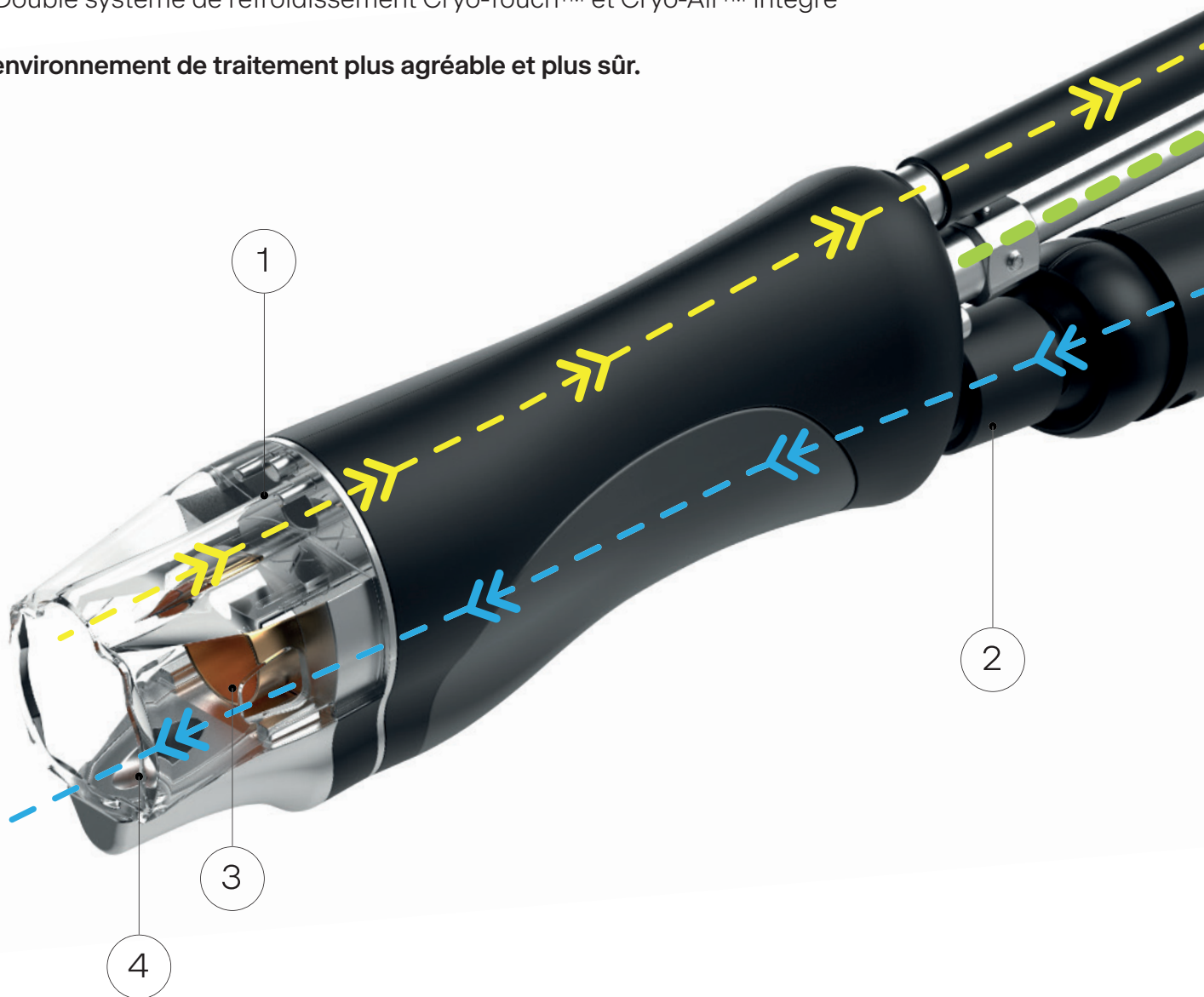

Fumée



Cryo-Air™



Fibre laser

UNE PLATEFORME POLYVALENTE

Splendor X ne se limite pas à l'épilation laser.

Selon les indications autorisées, la plateforme peut également être utilisée pour :



lésions vasculaires bénignes



lésions pigmentaires



poils incarnés



rajeunissement cutané



traitement de certaines imperfections dermatologiques

UNE TECHNOLOGIE QUI ACCOMPAGNE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ACTIVITÉ

**Une seule plateforme pour répondre
à plusieurs attentes patients.**



L'ÉPILATION LASER AU NIVEAU SUPÉRIEUR GRÂCE À :

BLEND X™



Combinaison
Alexandrite + Nd:YAG



Couverture homogène et sécurisée
de la zone traitée



Pour des traitements
rapides et performants



Confort renforcé pendant la séance



Sécurité et qualité de l'environnement



Spot carré exclusif



Grande puissance



DCS Cooling System



Évacuateur de fumé intégré

Choisir Splendor X, c'est offrir à vos patients une technologie reconnue pour son efficacité, sa polyvalence et son confort.

C'est également faire le choix d'une plateforme conçue pour accompagner durablement la croissance de votre activité.

Splendor X, la référence pour une épilation laser performante, personnalisée et rentable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLATEFORME	SPLENDOR X alimenté par la technologie BLEND X™				
Configurations	Alex + Nd:YAG	Alex	Alex ²	ANd:YAG	
Source laser	Sources laser Alexandrite et Nd:YAG	Sources laser Alexandrite unique	2 Sources laser Alexandrite	Nd:YAG (Impulsion longue)	Nd:YAG (Impulsion courte)*
Longueur d'onde (nm)	755 / 1064	755	755	1064	
Énergie maximale (J)	55 + 80 = 135	55	110	80	1
Durée de l'impulsion (ms)	3 - 100	2 - 100	2 - 100	1-100	0.3 - 1
Taux de répétition des impulsions (Hz)	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 10
Puissance moyenne maximale à 2 Hz (W)	110 + 140	110	220	140	N/A
Système de refroidissement	DCS (Dual cooling system)				
Poids et dimensions	190 kg - 84x50x131 cm (LxIxH) Bras, présentoir et pognée avant exclus				
Exigences électriques	200-230 VAC ; 50/60 Hz ; 25 A				
Taille des spots carrés (mm)	10x10, 14x14, 18x18, 20x20, 24x24, 27x27	10x10, 14x14, 18x18, 20x20	10x10, 14x14, 18x18, 20x20, 24x24, 27x27	10x10, 14x14, 18x18, 20x20	
Kit vasculaire carré (mm)	2x2, 3x3, 5x5	2x2, 3x3, 5x5	2x2, 3x3, 5x5	2x2, 3x3, 5x5	
Taille des spots ronds (mm)	10 - 14 - 18 - 20 - 24 - 26 - 30	10 - 14 - 18 - 20 - 24	10 - 14 - 18 - 20 - 24 - 26 - 30	10 - 14 - 18 - 20 - 24	10 - 14 - 18 - 20 - 24
Taille max. de spot (rond) à 2 Hz et 20 J/cm ² de fluence (mm)	26	18	26	20	n.d.

Indications d'utilisation*

La présente section comprend des informations sur les indications d'utilisation, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les complications et les effets indésirables (liste non exhaustive). Le laser Nd:YAG 1064 est destiné à : l'épilation et la réduction permanente de la pilosité**, le traitement de l'hirsutisme, le traitement des lésions pigmentaires bénignes, le traitement des lésions vasculaires dermatologiques, le traitement de l'atrophie et de l'élastose cutanée (laxité de la peau, rides, rajeunissement de la peau), le traitement de l'onychomycose, des verrues et les applications podiatriques. Le laser Alexandrite 755 est destiné à : l'épilation et la réduction permanente de la pilosité**, le traitement de l'hirsutisme, le traitement des lésions pigmentaires bénignes, le traitement des lésions vasculaires dermatologiques. Le laser combiné Alexandrite 755 et Nd:YAG 1064 est destiné à : l'épilation et la réduction permanente de la pilosité**, le traitement de l'hirsutisme, le traitement des lésions pigmentaires bénignes, le traitement des lésions vasculaires dermatologiques, le traitement de l'atrophie et de l'élastose cutanée (laxité de la peau, rides, rajeunissement de la peau), le traitement de l'onychomycose, des verrues et les applications podiatriques. * Les indications d'utilisation sont spécifiques à chaque pays et peuvent varier d'un pays à l'autre. **La réduction permanente de la pilosité est définie comme la réduction durable à long terme du nombre de poils repoussant à 6, 9 et 12 mois à compter de la fin du traitement. Types de peau Fitzpatrick I à VI, y compris les peaux bronzées***. *** PAS de bronzage profond, de bronzage récent, de coups de soleil ou de peau artificiellement bronzée.

Contre-indications

Cet appareil n'est PAS recommandé dans les cas suivants : les patients qui ont déjà eu des problèmes avec la thérapie au laser : ces patients doivent faire l'objet d'une évaluation appropriée avant le traitement. Patients présentant des chéloïdes cutanées : le risque de cicatrisation est plus élevé après tout traumatisme de la peau, y compris les traitements au laser. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour une liste complète des contre-indications.

Complications et effets indésirables

Les réactions immédiates les plus courantes au traitement laser de l'épilation, des lésions vasculaires, des lésions pigmentaires et des rides sont l'érythème, l'œdème (rougeur et gonflement), l'œdème périfolliculaire et l'œdème périvasculaire, le blanchiment vasculaire, l'éclaircissement ou l'assombrissement des pigments, qui peuvent survenir immédiatement après le traitement et se résorbent généralement en quelques jours. Si un œdème ou un érythème excessif ou prolongé se produit, il est considéré comme un effet indésirable. Les effets indésirables suivants peuvent apparaître chez certains patients dans la zone traitée : brûlures, croûtes et cloques sur la zone traitée, hypo ou hyperpigmentation (assombrissement ou éclaircissement de la peau), irritation, démangeaison, sensation de brûlure ou douleur pendant ou après le traitement. Infection au niveau de la zone traitée. Dans de rares cas, des cicatrices peuvent apparaître. Exacerbation transitoire de la pilosité. Une douleur légère à modérée peut être ressentie pendant ou après le traitement. Un purpura peut se manifester pendant plusieurs jours après le traitement. Prurit possible dans de rares cas. Une dermatite de contact ou une dermatite d'irritation peut survenir dans certains cas. Bien que les effets indésirables soient rares, ils peuvent être minimisés en suivant les instructions avant et après le traitement et en utilisant les techniques appropriées. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour une liste complète de l'utilisation prévue, des contre-indications et des risques.