



LA RÉFÉRENCE DU MICRONEEDLING MÉDICAL



CE QUE VOS PATIENTS SOUHAITENT

Les patients qui consultent pour une amélioration de la qualité de peau recherchent un résultat visible, sans éviction sociale prolongée et sans les contraintes d'un geste invasif.

SkinPen Precision Elite répond à cette attente par un mécanisme d'action naturel : la stimulation contrôlée du processus de cicatrisation cutanée, sans apport de chaleur ni de produit chimique.

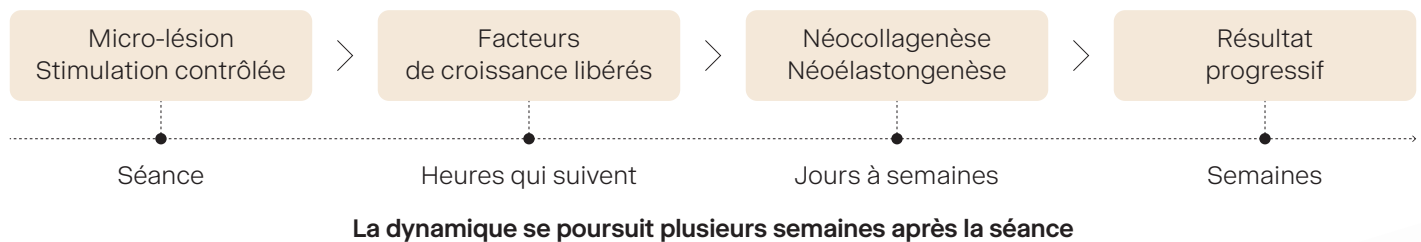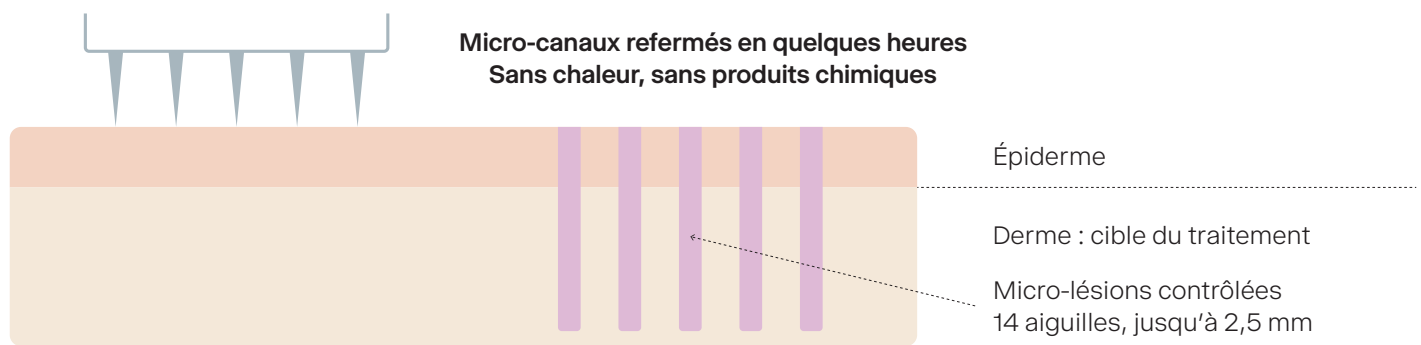

94%

des patients ont noté une amélioration dès le premier mois, étude clinique dédiée rides du cou

88%

de patients satisfaits à un mois, même étude clinique

Sources : dossiers réglementaires et cliniques SkinPen Precision. Chiffres à jour au moment de la rédaction.



Le geste déclenche une cascade de réparation tissulaire : libération de facteurs de croissance, néocollagenèse, néoélastogenèse qui se poursuit plusieurs semaines après la séance. C'est cette dynamique différée qui explique l'amélioration progressive constatée par les patients au fil des séances.

Profondeur de traitement validée jusqu'à 2,5 mm.

Des aiguilles conçues pour la constance clinique. Les aiguilles SkinPen, de qualité premium et fabriquées au Japon, conservent leur intégrité tout au long du protocole.

Plus de 90 études de validation (sécurité, qualité, performance) référencées par le fabricant, ainsi que des essais cliniques enregistrés publiquement (dont une étude sur le vieillissement de la main dorsale, University of Texas Southwestern Medical Center).

Indications validées

- Amélioration de l'apparence des rides du cou
- Amélioration de l'apparence des cicatrices d'acné du visage, adultes 22 ans et plus

UN DISPOSITIF RÉFÉRENT DANS SA CATÉGORIE

En 2018, SkinPen a obtenu aux États-Unis une classification « De Novo », réservée aux dispositifs sans équivalent antérieur sur le marché. Elle a créé le code produit QAI, qui encadre depuis l'ensemble des dispositifs de microneedling esthétique : tout nouveau dispositif doit désormais démontrer son équivalence à cette catégorie.

Cette antériorité explique la profondeur de la littérature de sécurité et d'efficacité accumulée depuis, et se traduit pour votre pratique par :

- Une documentation clinique parmi les plus étoffées de sa catégorie, utile à l'information éclairée de vos patients.
- Une marque identifiable par les patients qui se renseignent avant la consultation.
- Une traçabilité réglementaire qui facilite votre dossier de matériovigilance.






UNE INGÉNIERIE PENSÉE POUR LE GESTE MÉDICAL

Au-delà du protocole, la conception même du dispositif est pensée pour la précision du geste. SkinPen Precision Elite repose sur une assistance motorisée (et non un système à ressort) assurant une insertion et une rétraction optimales des aiguilles dans la peau à chaque impact, pour une profondeur de traitement constante sur l'ensemble de la séance.

Assistance motorisée
Profondeur constante

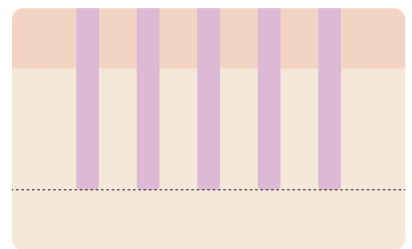

Insertion et rétraction maîtrisées

L'ergonomie du stylo a été travaillée dans cette même logique : le poids de la batterie est positionné pour équilibrer l'instrument en position verticale, ce qui favorise naturellement le bon angle de traitement et facilite la prise en main sur des séances prolongées.

UN LEVIER DE FIDÉLISATION



Protocole multi-séances
qui installe un rendez-
vous régulier avec votre
patientèle



Point d'entrée pertinent
pour une patientèle
plus jeune ou novice en
médecine esthétique,
moins encline à un premier
geste injectable



Association possible avec
des actifs topiques adaptés
pour élargir le panier de
soins proposés

UNE RÉPONSE CIBLÉE À CHAQUE BESOIN

Selon le diagnostic que vous établissez en consultation,
SkinPen Precision Elite peut être indiqué pour :



Rides et ridules



Vergetures



Cicatrices d'acné



Pores dilatés



Cicatrices chirurgicales




Troubles de la pigmentation (dyschromies)

5 zones de traitement pour tous types de peau : Visage | Cou | Décolleté | Mains | Corps


DES RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT



Photos fournies par @sknbylina

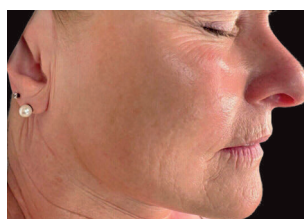

Photos fournies par @beautyboss_amy et @aspenmedispa

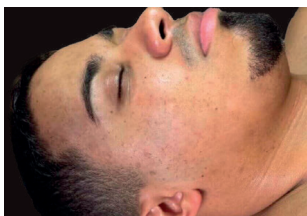


Photos fournies par Sonya Savage Skin Care



Photos fournies par @joavanegas_aesthetician



Photos fournies par @luxnlav

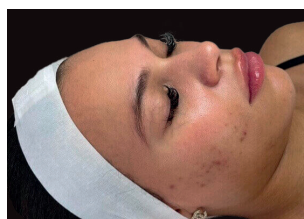

Photos fournies par Sonya Savage Skin Care



Photos fournies par Cathy A. Presnick



Photos fournies par The Luxe Estie

PARAMÈTRES TECHNIQUES

SkinPen® Precision Elite	
Numéro d'enregistrement auprès de la FDA	3010392991
Poids et unité	170 g, longueur de 153 mm, diamètre extérieur max. de 38 mm
Exigences électriques	Entrée de la base du chargeur : 5 V DC, 2 A max.
Tension de sortie	5 W (max.)
Temps de charge	D'une charge de 10 % à 90 % en 8 heures
Autonomie	> 6 heures (dans des conditions normales d'utilisation)
Vitesse	6300 tr/min – 7700 tr/min
Aiguilles	• 14 aiguilles solides au total • 32 BWG (calibre) • < 32 RMS (rugosité) • Acier inoxydable de grade médical • Spécification de tranchant : rayon maximal de 0,005 mm • La longueur maximale des aiguilles à partir de la surface de la tête d'aiguille est inférieure à 2,75 mm • Longueur de l'aiguille : longueur exposée de $2,5 \pm 0,25$ mm • Géométrie de l'aiguille : diamètre de 0,25 mm avec un cône de 1 mm à partir de la pointe de l'aiguille • Profondeur de pénétration maximale : $2,5 \pm 0,25$ mm • Cadence de perforation : 1 470 à 1 797 perforations/seconde • La surface de la tête de l'aiguille est inférieure à 2,7 mm
Fonctionnement	Sans fil
Adaptateur secteur	Qualité médicale, universellement compatible exigences d'alimentation : 190-264 VCA à 47-63 Hz
Fréquence de transmission de la base du chargeur	Entre 110 kHz et 205 kHz

Mises en garde et informations de sécurité

SkinPen® Precision Elite est un dispositif de micropuncture médicale destiné à servir de traitement pour améliorer l'aspect des cicatrices dues à l'acné facial chez l'adulte de 22 ans et plus, mais aussi à améliorer l'aspect des ridules et des rides du visage et du cou. SkinPen® Precision Elite est également destiné à traiter les affections pigmentaires (dyschromie), notamment le mélasma, le vitiligo et les lentigines solaires.

Les contre-indications principaux sont : grossesse ou allaitement, cancer de la peau actif dans la ou les zone(s) traitée(s) ; présence de plaies ouvertes ou une peau irritée dans la ou les zone(s) traitée(s), allergie à l'acier inoxydable ou aux anesthésiques, présence de trouble hémorragique ou dysfonctionnement hémostatique, prise de médicaments contenant de l'isotrétinoïne (par ex. Accutane).

L'utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait accroître les émissions électromagnétiques accrues ou diminuer l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un dysfonctionnement. N'utilisez aucun équipement qui n'est pas spécifiquement conçu pour SkinPen® Precision Elite pour éviter de nuire aux performances prévues de l'appareil.

Le système SkinPen® Precision Elite n'a pas été évalué chez les populations de patients suivantes : kératose actinique (solaire) ; acné active ; maladies vasculaires du collagène ou anomalies cardiaques ; diabète ; eczéma, psoriasis et autres affections chroniques dans la zone de traitement ou dans d'autres parties du corps ; traitement immunosuppresseur ; antécédents de dermatite de contact ; grains de beauté dans la zone de traitement ; rosacée ; infections bactériennes, fongiques ou virales actives (c.-à-d. herpès, verrues) ; cicatrices chéloïdes (cicatrice qui pousse en dehors des limites d'une cicatrice originale) ; patients sous anticoagulants ; cicatrices et vergetures de moins d'un an ; sclérodermie ; et déficiences de cicatrisation.